

Tipshaler®



Tipshaler®

ティップスヘイラー

pMDI 用吸入補助器具（スパーサー）



一般医療機器
一般的名称：呼吸ガス混合器
販売名：ティップスヘイラー
医療機器届出番号：27B2X00303000041


navis*

- ◆ マスクは口と鼻の間に仕切があるため、鼻からの吸入を防止でき、経口吸入を促進します（乳児用マスクは仕切なし）。
- ◆ チャンバー形状により、上気道への大きい粒子の沈着が減少します。
- ◆ 呼吸弁の動きが見やすいため、吸入できているかの確認が容易です。
- ◆ バックピースには柔軟性があり、すべての pMDI 製剤に装着可能です。
- ◆ 次亜塩素酸ナトリウム、イソプロピルアルコールなどによる浸漬消毒が可能です。
- ◆ コンパクトなサイズで持ち運びにも適しています。

品番	型番	マスクサイズ	対象年齢（目安）	価格(税抜)
7-9200-01	マスクなし	—	6歳以上	¥2,200
7-9200-02	乳児用マスク付	(幅)69×(高さ)69mm	0~1歳	¥2,800
7-9200-03	幼児用マスク付	(幅)79×(高さ)79mm	1~6歳	¥2,800
7-9200-04	マスク付	(幅)89×(高さ)119mm	6歳以上	¥3,200




仕切つきマスク

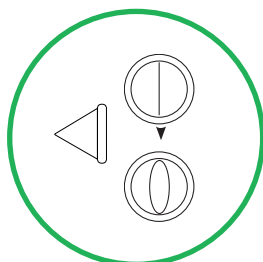

適切な抵抗設定の一方弁バルブ



視認性の良いバルブ

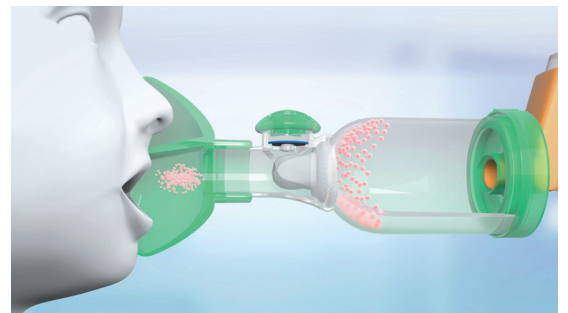


チャンバー形状及び素材*1により、大きい粒子をチャンバー内に残留させることで上気道への大きな粒子の沈着が減少

*1 本製品は帯電防止仕様ではありません。

【仕様】

- 材質：本体・マウスピース / ポリプロピレン、マスク・バックピース / TPE、呼吸弁 / シリコン
- 本体容量：150ml
- ラテックスフリー、BPA フリー

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。ご了承ください。
 ※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

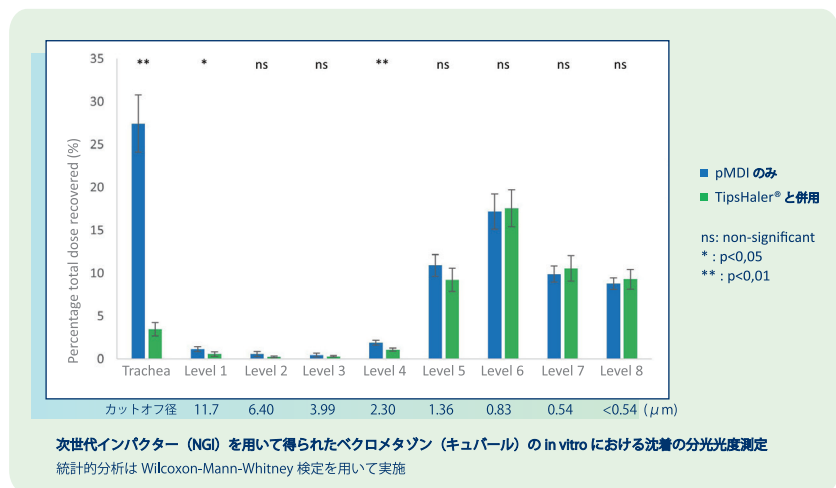

製造販売業者

AS ONE アズワン株式会社

navis*

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

<https://axel.as-1.co.jp>



喘息及びアレルギーなど呼吸器疾患の患者向けの商品を研究、開発、製造するフランスの医療機器メーカー