

# 静脈可視

静脈可視化装置

# NVS 5000



静脈が見える!

使用例

静脈が可視化できるため、穿刺のストレス軽減に繋がります。


## いろいろな見方

5色の静脈投影と明暗反転により、10種類から見やすいタイプが選べます。静脈深度の判断補助機能付きです。

環境に合わせた明るさ、サイズ、色展開

〈5段階の明るさ〉 ※短押し

処置環境にあわせて明るさを変更できます。

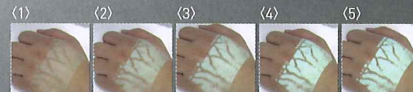


〈用途に応じたサイズ切り替え〉 ※長押し

広範囲で使用する場合  
(静脈状態確認時等)



処置に集中する場合/小児に使用する場合  
顔など狭い範囲に使用する場合

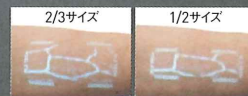

## 狙いを定めて!

静脈中心線補助モードがあり  
穿刺箇所判断に役立ちます。



## スキンマーカー

処置個所のマーキングの際にも



スキンマーカー(別売)  
品番 7-7601-13

7-9248-01

750,000円(税抜)



お手軽なレンタルサービスもございます。

30,000円(税抜)/5日~

## 【仕様】

本体サイズ(mm): 210×60×60

連続可動時間: 5時間

充電時間: 3時間

機能

5色(白系、シアン、緑、赤、青)、色反転、投影部3サイズ展開(標準、2/3、1/2)、  
明るさ変更(5段階)、ファインモード(細く、深い血管用)、静脈中心線補助モード、  
深さ検知、画像撮影、適正距離検出

重量: 420g

電源: 専用リチウムリオン電池 3.6V

セット内容(本体): 本体、充電コード、充電スタンド、キャリングケース、キャリブレーションカード

医療機器届出番号: 27B2X00303000040

商品の詳しい情報は検索サイト「AXEL」をご覧ください



商品名や品番で  
簡単に検索できます **AXEL**  
<https://axel.as-1.co.jp>

**AS ONE アズワン株式会社**

〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

