

検査室や回復室での待機・搬送など様々な用途で



# 移動式検査台 (GRACE(グレイス) II)

選べるカラーは7色!

スカイブルー	ライトブルー	ライムグリーン	ライトグリーン	ピンク	クリーム	アイボリー
【カラーコード表】						
品番	-11	-12	-13	-14	-15	-16
色	スカイブルー	ライトブルー	ライムグリーン	ライトグリーン	ピンク	クリーム
						アイボリー



状況に合わせて、臥位⇔座位の姿勢を自由に変えられます。  
※緊急時のトレンデレンブルグ体位にも対応します。



電動モーターで寝台高さを調整できます。  
※全機種、ハンドスイッチ標準装備しています。  
※フットスイッチも標準装備したモデルもあります。



キャスターのブレーキペダルは、寝台をフラットにしても操作しやすい本体横に付いています。  
ブレーキは、四輪オールロック⇔四輪フリー⇔二輪旋回ロック(直進補助)に切り替えられ、φ150mmの双輪キャスターのため、しっかりと止まります。



靴置きが付いていますので、患者の私物やスリッパを置くことができます。



背もたれ角度を調整するためのロック解除レバーは、ハンドル側からも本体横からも操作しやすい形状です。



専用のガード棒(別売)は、左右とも2ヶ所ずつ設置場所があります。



寝台から高さ240mmのサイドガードですので安心です。  
また、乗降の際や、処置の際に邪魔にならないよう、真下に下げることができます。




専用のマットレス(別売)は切れ目のない清拭しやすい一枚もので、通常の厚さの20mmと上質な厚さの50mmから選べます。  
耐圧分散に優れたソフトなクッション性を有しつつも、反発性に優れますので楽に体位変換できます。

## 製品仕様

●材質：本体フレーム／スチール（焼付塗装）、本体マット・マクラ／ウレタン（抗菌防汚カバー（耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃）） ●本体サイズ：ベッド型／750×1890×740～1040mm、イス型／750×1341×1593mm ●寝台サイズ：650×1890×500～800mm ●耐荷重：静止時／200kg、昇降時／150kg ●背もたれ角度：水平角70度 ●トレンドレンプルグ体位：水平角-10度  
●電源：AC100V 50/60Hz ●消費電力：Max144W ●電源コード長：約3.2m ●昇降可能回数：約50回（バッテリー搭載モデル 6時間フル充電時） ●サイドガード高さ：寝台天面から240mm ●付属品：ハンドスイッチ、シューズ置き、まくら、安全ベルト、フットスイッチ・取付ホルダー（搭載モデルのみ）、バッテリー（搭載モデルのみ） ●重量：約65kg

品番	型番	ハンドスイッチ	フットスイッチ	バッテリー	価格（税抜）
9-1086-11～17	TR-A03	○	-	-	¥554,000
9-1089-11～17	TR-A03W	○	○	-	¥575,000
7-9915-11～17	TR-B03	○	-	○	¥575,000
9-1088-11～17	TR-B03W	○	○	○	¥607,000

## オプション

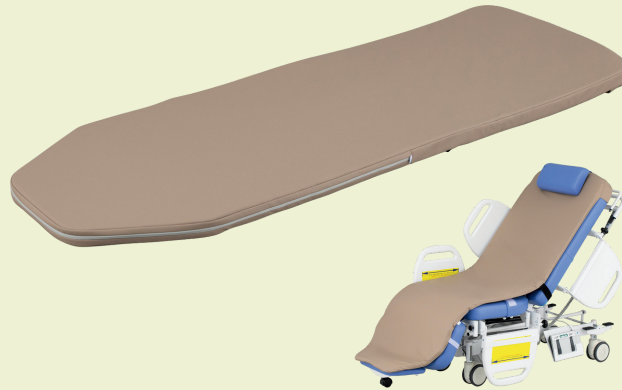

品番	7-7716-42
品名	ボンベ架
仕様	500L用
価格（税抜）	¥13,000

8-919-01	8-919-02
高反発ソフトマットレス	
t20mm	t50mm
¥49,000	¥72,000

8-5163-72
ガートル棒
4本架
¥10,000

# アズワン株式会社

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q> (24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

電話受付時間：午前9時～午後5時30分（土・日・祝日及び弊社休業日は除く）

◎価格・納期については変動する場合がございます。最新情報はAXELをご覧ください。

■ご用命は信頼ある代理店へ