


サージカルライト

KLARO™
IN VIVO SURGICAL LIGHTING

術野の暗い場所を直接明るく
できるライト

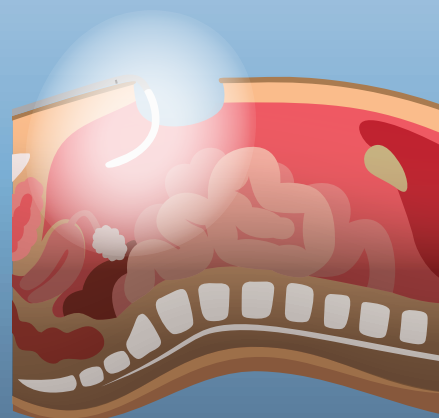

4段階の照度切替

状況に応じて照度を変更可能

①約 2,100lx, ②約 3,300lx,
③約 5,000lx, ④約 7,000lx



柔軟・形状維持

光源部は任意の角度に曲げ及び固定が
可能であり、意図する箇所へ光を届けます



コードレス

コードレスかつ軽量なため
手術を妨げません



簡単操作

ボタン一つの簡単操作



長寿命

4時間の長寿命。電池残量が15分を
切ると赤いライトでお知らせ



ハンズフリー

本体はドレープに取り付けでき、
光源部は開創器へ取付け可能



安全性に優れた光源

光源部は38℃以下を維持し、
術野を安全に保ちます



細い先端で邪魔にならない

光源部は直径4.6mmであり
狭い術野でも邪魔しません

術野を直接照らすため、本来光が届きにくい箇所を明るくすることができます。

滅菌
個包装

単回
使用



点灯前



点灯後



残電池寿命が15分となると赤く点灯するため、突然消灯する心配がありません。

4時間の長寿命電池であり、使用中のオン・オフ切り替えも可能です。

発熱を抑える安全設計のライトです。

ライトを術者の体に取り付ける必要が無いため、
術者の体への負担が軽減します。



使用例



使用例



リトラクター
ループ

リトラクターループを使用することで開創器へ取り付けできます。

品番	型番	サイズ(mm)※1	入数	価格(税抜)
8-409-01	1個入	108×70×38	1個	¥19,800
8-409-51	10個入		1箱(10個入)	¥190,000

※1 本体(バッテリーパック)のサイズです。

※1個ずつパックされています。

10個入りは、1箱に中箱(1個/パック×5パック入)が2箱入っています。

仕様

- コード長：800mm
- コード径：φ4.6mm
- 照度切り替え：4段階
- 電池寿命：約4時間
- 電源：内蔵リチウム電池
- 重量：130g(本体)
- EOG滅菌済(個包装) ・ 単回使用製品
- 付属品：リトラクターループ×4個、ミニリトラクターループ2個

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00～午後 5:30 受付(土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

商品の内容に関する
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索



製造販売業者

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

[2309PASPB]