



パルスオキシメータ

# パルモニ プラス

パルモニ KM-350 Plus

Pulmoni® Plus



うれしい機能をプラスして  
新しくなったパルモニプラス



KENZMEDICO

# 可愛いだけじゃない。プロ仕様の高性能な優等生。

## 大画面で明るい白色バックライト付きのLCDディスプレイパネル

**脈波検出マーク**  
脈拍の強さを4段階で表示します。

**安定性マーク**  
測定状態がよいことを示しています。

**酸素飽和度 (%SpO<sub>2</sub>)**

**脈拍数 (拍/分)**

**NEW!!**  
**消毒剤で拭けるパネル**  
使用できる薬剤は、消毒用エタノール(76.9~81.4vol%)・第4級アンモニウム塩・次亜塩素酸ナトリウム・クロルヘキシジン・グルコン酸塩・塩化ベンザルコニウム・イソプロパノール(70vol%)

**表示反転ボタン**  
対面測定・自己測定  
対面の用途によって表示切替が可能です。

自己測定 対面測定

## メンテナンス対応可能な日本製

国内工場にて生産および修理・メンテナンスを行っています。




### JIS規格に適合

2014年JIS規格適合

当製品に関しては、製造販売責任者である日本精密測器(株)が、東京医科大学渡航者医療センターに血液ガス対照臨床実験を依頼し、2014年9月1日付で制定されたJIS T 80601-2-61の基準に適合していることを確認しております。


### 血液ガスとの相関関係\*

日本精密測器(株)製のパルスオキシメータのデータ

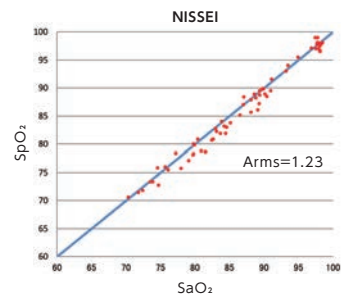

\*日本精密測器(株)社内資料

## 指先にピタッとフィットする構造

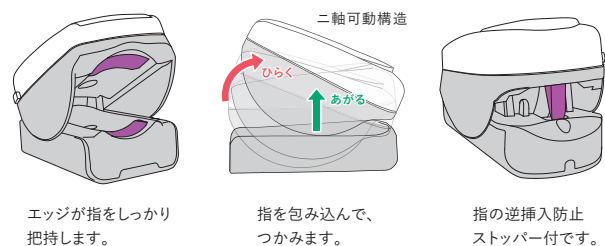

### 指を入れれば自動で測定開始

測定可能指周囲長: 約30~66mm  
小児や指の細い方も測定可能。




## 多機能なKENZMEDICOのロングストラップ

NEW!!


0350B021 ネットストラップWP-1



たすき掛けをして、ポケットにすっぽり収納できます。長さ調節も可能なので、体格問わずお使いいただけます。

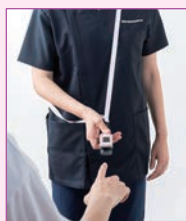

たすき掛けしたまま患者様への測定が可能です。

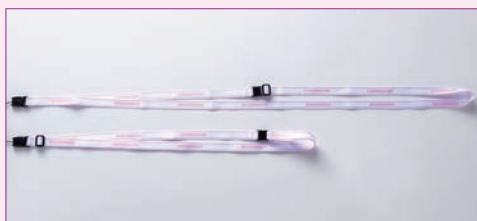

紐の長さを片側約50cm(1周100cm)~片側約80cm(1周160cm)まで調節可能です。



取外し可能なストラップパーツ(平松葉)

強く引っ張ると外れる安全装置付き

販売名 **パルモニ KM-350 Plus**

医療機器認証番号 304AGBZX00102000



カラー	品番	JAN
ピンク	0350B011	4582105370944
ブルー	0350B012	4582105370951
パープル	0350B013	4582105370968
イエロー	0350B014	4582105370975
グリーン	0350B015	4582105370982

### 通信機能搭載モデル

販売名 **パルモニ KM-350/C**

医療機器認証番号 231AFBZX00050000



カラー	品番	JAN
スーパーホワイト	0350B007	4582105370838

製品仕様などの詳細はwebでご確認ください。

### 測定値を無線通信で外部に送信

※専用のNFCリーダー/ライターが必要になります。 ※接続可能な通信システム「医療介護ネットワークシステム LAVITA」日本光電工業株式会社 ※通信システムに関するお問い合わせはケンツメディコ株式会社までお願いします。

### 製品仕様

測定方法	2波長吸光度測定法
測定可能指周囲長	約30~66mm(爪付け根部指周囲)
測定範囲	血中酸素飽和度(SpO <sub>2</sub> ): 0~100% 脈拍数: 30~240拍/分
測定精度	血中酸素飽和度(SpO <sub>2</sub> ): ±2% (70%≦SpO <sub>2</sub> ≦100%) 脈拍数: ±3%, または±1ディジットの大きい方(30~240拍/分)

本体サイズ	約(D)59×(W)36×(H)36mm
本体重量	約40g(電池含まず)
電源	単4アルカリ電池2本
電池寿命	約4,800回(1回約30秒) 連続使用の場合は約40時間

機器分類/クラス分類	特定保守管理医療機器/クラスII
セット内容	本体、ストラップ、単4アルカリ電池2本、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様は予告なく変更させていただくことがあります。  
Pulmoniはケンツメディコ株式会社の登録商標です。

〈発売元〉 **ケンツメディコ株式会社**

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552番地1  
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716  
ホームページ <http://www.kenzmedico.co.jp>

ケンツメディコホームページ



〈製造販売業者〉日本精密測器株式会社

ケンツメディコ製2023年8月作成 [CAT.No.23015] KS300/RK3.4(0.5)