水・エアーの力で強力洗浄

# が分分

落ちない汚れを上げる格とす

商品の内容に関するお問い合わせは QRにてお願い致します。



ASONE アズワコ株式会社

# 耐アルカリ性の錆びにくい アルミニウム・シリコン合金ボデ



空圧: 0.15MPa ~ 0.6MPa

水圧: 0.15MPa ~ 0.6MPa

重量:300g

耐熱:-10℃~60℃

PVC ホース \*\*

品番:8-641-01 定価:28,000円

ステンレスカバーホース


品番:8-641-02 定価:29,800円

### ・般的な水道に簡単取り付け




接続する水道が 1/2 スレッドであれば 付属のホースに直接接続が可能です。

### 様々な現場で使用可能

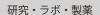



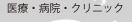





工場・製造業

## ノズルチェンジで、洗浄自在





狭い隙間の汚れ・細い 物を洗浄する場合細い ノズルを使用





ノズルがゴムのコーンに囲 まれていて、遠沈菅等洗浄し ている時水が溢れないよう に塞ぐノズル





内径が太めなチューブ やフラスコを洗浄する 時のノズル





外径4mmの先端とゴムの ベースでチューブ・カニュー レや筒型の物を洗浄可能





シャワー型のノズルで洗 浄できる面積を広げる



全長87mm、フレア型の噴 射により三角フラスコ等の洗 浄に適切





外径3mmの先端とゴムのベースでチューブ・カニュー ベースでチューブ・カニュー レや筒型の物を洗浄可能



ベンチュリーノズルで洗浄液 と水を噴射 油汚れ等に適切

