

ポリウレタンフォーム 保護パッド

摩擦、圧力、過湿潤などから皮膚を保護するパッド




- ▶ 多層構造のポリウレタンフォームが皮膚を保護します。
- ▶ 接触面全面がメッシュ状のシリコーン粘着剤で、肌に優しく、貼り直しもできます。
- ▶ パッド部は柔らかくクッション性があるため、圧力を分散します。
- ▶ 入数が少なく個包装のため、過剰在庫や廃棄予防に有効です。

多層構造のポリウレタンフォームが皮膚をやさしく保護



- 防水フィルム層**
・通気性のある防水フィルム
- 吸収層**
・皮膚表面の水分を吸収
- 不織布層**
・上下の層を接合
- ポリウレタンフォーム**
・クッション性のある柔らかいフォーム
- シリコーン粘着層**
・メッシュ状のシリコーン粘着剤
・肌に優しく、貼り直しも可能

用途に応じて選べる4つの形状

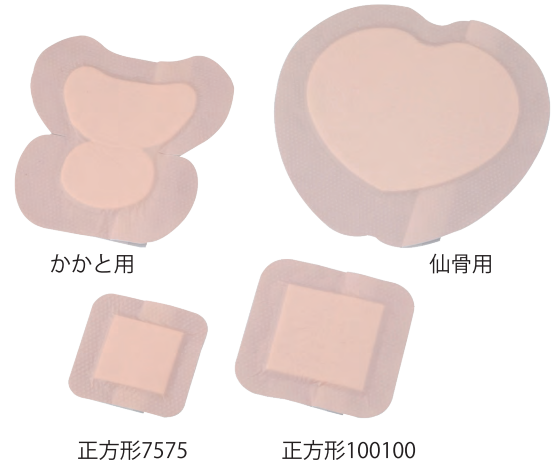

使用例



正方形100100



かかと用



接触面

品番	型番	サイズ (mm)	パッド部 (mm)	入数	価格(税抜)
8-655-01	正方形7575	75×75	45×45	1箱 (1枚/袋×6袋入)	¥1,000
8-655-02	正方形100100	100×100	63×63		¥1,500
8-655-03	かかと用	150×135	100×88	1箱 (1枚/袋×5袋入)	¥4,200
8-655-04	仙骨用	180×180	125×140		¥3,300

※本品は健康な皮膚を保護する目的にて使用します。傷やけが、皮膚疾患やその疑いのある部位には使用しないでください。

仕様

- 材質：PU（ポリウレタン）・シリコーン
- EOG 滅菌済（個包装）

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00～午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))



販売元

AS ONE **アズワン株式会社**

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号