



Vital Navi バイタルナビ アネロイド血圧計

衝撃に強い水銀フリーの安心安全血圧計

軽量の薄型フォームと
耐衝撃仕様で
現場での使いやすさを
追求しました。

Debut!



成人用


操作性が大幅にアップ。



使用例

ゲージをループに取り付けたままで移動でき、360度の回転ができるので、見やすい位置からの測定が可能です。ゲージはループからの脱着もできるので、数値の読み取りが、手元でも行えます。

360度回転可能なゲージ

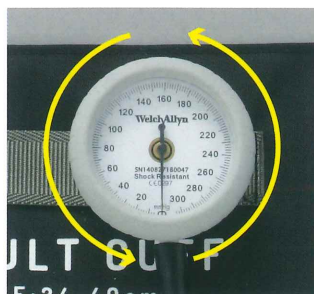


小児用

navis

Vital Navi バイタルナビ アネロイド血圧計

Gauge (ゲージ)

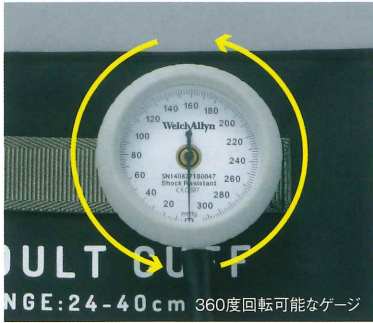

1 衝撃に強い。

ウェルチ・アレン社製デュラショックゲージ採用により、75cmの高さからの耐落下衝撃設計。AAMI※の耐落下衝撃仕様に準拠し、繁忙な臨床現場でも安心してお使いいただけます。

※AAMI(米国医療計測機器振興協会規格の略称)1967年設立。医療技術に関して安全使用及び安全な環境のための機器製品規格及びガイドラインを作成

2 軽くて薄い。


従来のゲージよりはるかに軽く、薄型のフォルムを実現しました。従来品の約半分の重さと軽く、携帯性に優れています。
ゲージ重量:約250g

3 利便性アップ。


360度回転が可能なゲージによって、読みとる方向を選びません。

4 正確な脈波をキャッチ。

ギヤフリー構造はらせん状のぜんまいによって指示針を回転する構造になっています。ギヤを使わない構造は、忠実に脈波を指示針に伝え、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。

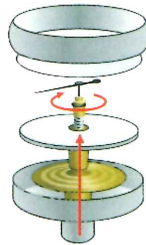

Cuff (カフ)

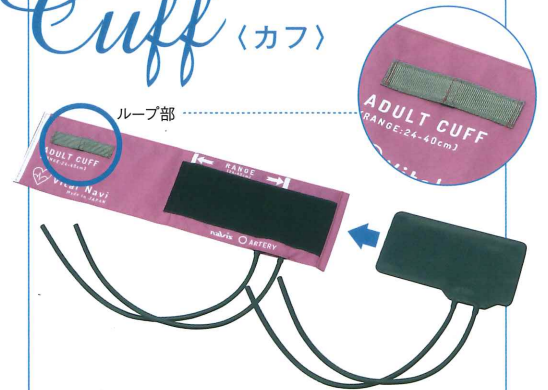

5 使いやすさを追求。

医療現場で実績のあるツーピース型のカフを採用し、使いやすさを追求しました。また、ループ付のカフにより、ゲージの移動、またはカフからの脱着も容易に行えます。また、アルコール清拭および、洗浄可能なナイロン製のカフを採用しています。

なぜ水銀フリーの血圧計なの？

水銀に関する水俣条約の中で2020年以降は水銀を使用した血圧計の製造、輸出入が禁止されるの。これによって水銀フリーのアネロイド血圧計も注目されているわ!



バイタルナビ アネロイド血圧計


品番	色	適用サイズ(腕回り)
8-7092-01	ネイビーブルー(成人用)	24-40cm
8-7092-02	グレー(成人用)	24-40cm
8-7092-03	マゼンタ(成人用)	24-40cm
8-7092-04	ブラック(成人用)	24-40cm
8-7092-05	ピンク(成人用)	24-40cm
8-7092-06	スカイブルー(成人用)	24-40cm
8-7092-07	スカイブルー(小児用)	18-28cm

【仕様】●ゲージ:ウェルチ・アレンDS44A デュラショックゲージ●材質:カフ/ナイロン、ブラダ- (ゴム袋・チューブ)・ゴム球/ラテックス●測定範囲:0~300mmHg●精度:±3mmHg●精度保証:5年●重量:約250g

アネロイド血圧計

「アネロイド」とは、ギリシャ語で「液体を使わない」という意味、すなわち、水銀を使用しない、安全な血圧計です。

ゴム球

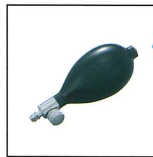

アズワン株式会社

navis ナビス

大阪本社 東京支店 横浜支店 名古屋支店
札幌営業所 仙台営業所 大宮営業所 西東京営業所
静岡営業所 京都営業所 神戸営業所 高松営業所
広島営業所 福岡営業所 沖縄営業所

ご用命は下記代理店へ