



ナースコールシステムへの接続方法について

病院や介護施設でのご使用の場合に、既存のナースコールシステムに接続して通報することができます。ナースコールシステムのPHSへの通報もできます。以下の方法がありますので、ご使用中のナースコールメーカー名、型番、コネクタ形状などを詳しくお知らせ下さい。※詳しくは下記をご覧ください。

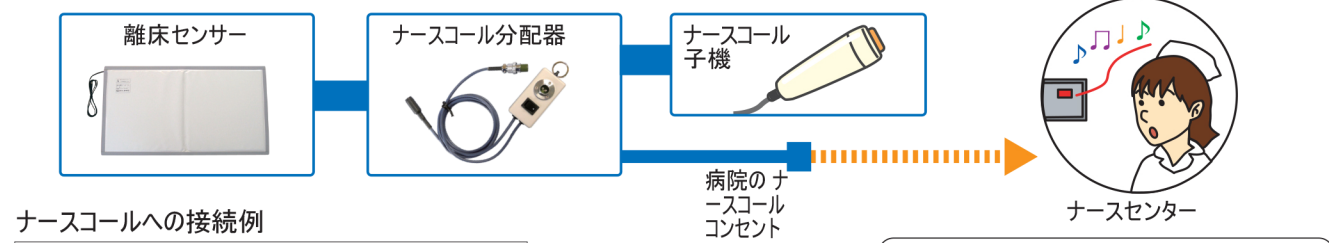


ナースコールへの接続例

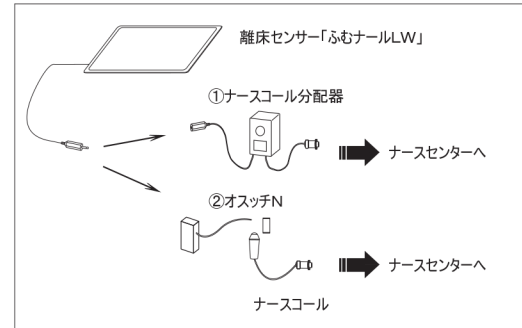


ナースコール通報タイプ

病院や施設のナースコール設備として通報します。

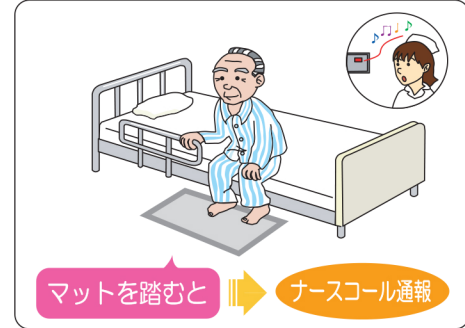

1 ナースコール分配器

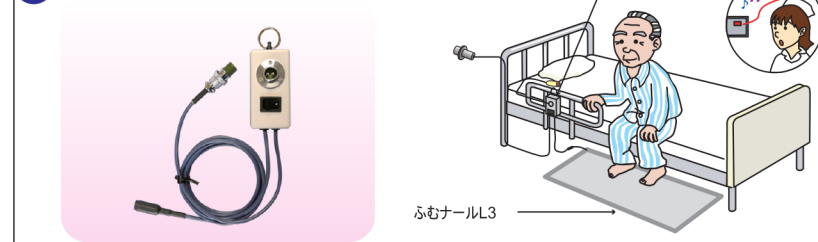


ご使用中のナースコールと離床センサーを併用して使用するための分配器です。ナースコールシステムの仕様に応じてご提供を致します。

品番	00007A00
価格	
接続コード長	入力側1m、出力側2m

※ナースコールの機種により価格・接続コード長が異なります。

2 オスツチN

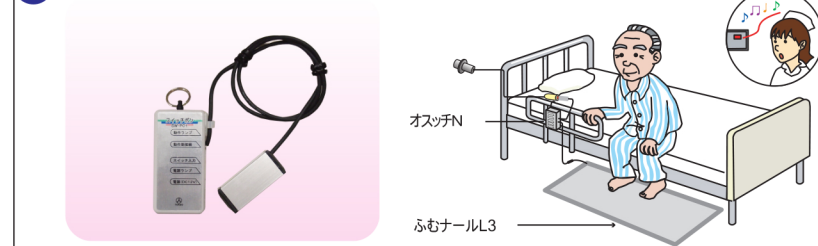

離床センサーの信号を検知すると、オスツチNがナースコール押しボタンを押しナースコールシステムへ通報します。

品番	00110B00
電源	ACアダプタ(DC12V)
作動力	約500g
質量	コトコト部:60g 駆動部:120g
スイッチ接続	Φ3.57mm
価格	


JANコード 4560346572785

ナースコールシステムへの事前確認について

- ナースコールのメーカーを確認して下さい。
①ケアコム ②パナソニック ③アイホン ④その他
- ナースコールのメーカー品番を確認して下さい。
例)NFR-8、RB-826WZ など
- コネクタの形状を確認して下さい。



4 スwitchの形状を確認して下さい。

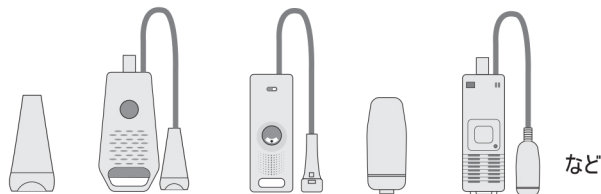

その他確認すること

・ピンの数は何個ですか？(2~6個) ・ピンの穴径は、大、小か同一ですか？ ・ピンの形状はオーディオジャックですか？ ・コネクタの材質は金属ですか？樹脂ですか？



22pにナースコール参照図を掲載しています。そちらもご参照ください。

ナースコール参照

メーカー	(株) ケアコム									パナソニック		
プラグ番号	01	02	03	04	08	09	15	16	18	02	10	
タイプ	A	B	C	D*	E	F	G*	H*	J	K	L	
コネクタ形状	標準2P	トコソ2P	標準3P	6mmプラグ	ケアコム4P	ケアコム4PZ	ケアコム5P	ケアコム6PF	ケアコムWell6P	トコソ2P	パナニック2P	
ナースコールスイッチ形状												
ナースコール子機型番	RB-822 RB-822A RB-822C RB-822A-C		RB-823 RB-823-C		※08は型番を確認してください BA-511 BA-511A BA-501 BA-501A BA-511Z BA-511ZA BA-501Z BA-501ZA			RB-830Z	BA-502Z BA-501Z	RB-826WZ RA-601WZ RA-602WZ	VHR-560C BVH-R560C	
メーカー	アイホン (株)											
プラグ番号	01	02	03	04	05	6B	6C	6E	07	11	12	14
タイプ	M	N	O	P*	Q	R	S	T	U	V	W	Y
コネクタ形状	標準2P	トコソ2P	標準3P	6mmプラグ	アイホンプラ2P	アイホン4PB	アイホン4PC	アイホン4PE	アイホン5P	アイホン5PNF	アイホン6PNF	アイホン3PNF
ナースコールスイッチ形状												
ナースコール子機型番	NBR-8A/A NBR-8A-C				UAR-8 UBR-8	※06-B, C, Eは型番を確認してください 06-Bは一部対応できない場合があります			UA-SB8 UB-SB8	NFR-8A NFR-8	NF-SBA NF-SB	
メーカー	アイホン (株)		ナカヨ		NTT							
プラグ番号	19		20		21							
タイプ	アイホン6V		ナカヨSP		アンシンSP							
コネクタ形状												
ナースコールスイッチ形状												
ナースコール子機型番	NLR-SB NLR-8 NLR-8-TT											

⑱ケアコム社「Well」シリーズは、警報の鳴り方で2種類ございます。

- 一般呼び出し
品名: ナースコール分配器ケアコム6PW 品番: 00007B06
定価
- 特定呼び出し
品名: ナースコール分配器ケアコム6PW-OP1 品番: 00007B09
定価

※印はナースコール分配器の対応をしてお知らせするので、ご相談ください。