

滅菌済み透明眼帯 アイカバーシリーズ

感染対策としてリユース製品ではなく、ディスポーザブル製品を選ばれる医療施設様が増えております。

アイカバーシリーズ 3 つの特徴

- ① 全て EOG 滅菌済みです。
- ② ディスポーザブルです。
- ③ 生産性の向上にお役立ちします。

① 全て EOG 滅菌済みです。

アイカバーシリーズは全て EOG 滅菌済みで、安全性の高い商品です。エチレンオキサイドを直接流入させることにより、微生物を殺滅しております。

② ディスポーザブル眼帯です。

リユースだと衛生的に不安があることや、院内感染を防ぐためにすぐに交換したいという医療施設様からのご要望が増えております。個包装のため衛生面に気にされる患者様にもご安心頂けます。

③ 生産性の向上にお役立ちします。

眼科医様、看護師様からのご要望で全 5 種類を開発、販売しております。

<ご採用施設様からのお声>

「リユース眼帯と比べて再滅菌の手間がなくなったため、その分医療行為に時間を割けるようになりました。」

「ガーゼ付きタイプは眼帯にガーゼを巻く手間がなくなり、1 件あたり約 30 秒短縮できるようになりました。」(品番:8954-01)

「テープで肌が荒れてしまう患者様がいらした際は、紐を別で購入し眼帯に通していましたが、初めから紐が付いている商品にしたことで作業を省くことができました。」(品番:8928-01,8889-01)

アイカバー ガーゼ滅菌

無料
サンプル

MADE IN CHINA

- プラスチック眼帯を1枚のガーゼで包み、1枚は患者様の皮膚にあてる用でパックされています。
- 現場のお声からガーゼをつけるのが時間がかかるという、現場スタッフ様のお声から開発しました。



乱糸が出ないように
裁断面を内側に折りたたんだ、
8ply処置用ガーゼです。

滅菌

40枚入

滅菌期限5年間

品番	JANコード	標準価格
8954-01	4990097076087	オープン価格

●ガーゼサイズ…75×75mm ●ガーゼ素材…綿 ●発注単位…1箱(40枚入) ●滅菌期限…5年間 ●一般医療機器届出番号(クラスI)…23B3X00001654329 ●JMDNコード…11661000

アイカバー 滅菌紐付き

紐も留め具も滅菌済



留め具

2つの要素を組み合わせ

滅菌だから衛生的 + 紐付きだから使い易い

病院等での紐の取り付け作業が省けます

- テープで固定する必要がないため、かぶれる心配がありません
- 紐に付いた留め具をずらすことで長さの調節が可能です

30枚入 滅菌期限5年間

品番	JANコード	標準価格
8928-01	4990097970552	オープン価格

●サイズ…W77×D57mm ●重量…9g(紐含む) ●厚さ…1.8mm
●素材…本体:ポリカーボネート、紐:コットン(長さ:45cm結んだ状態)、
ストッパー:ポリプロピレン ●発注単位…1箱(30枚入)
●滅菌期限…製造日より5年間

お顔にあわせて調整できます。
紐を通す手間が省けます

アイカバー 滅菌

滅菌

単品個装のため、術後の目をより清潔に保ちます



40枚入

滅菌期限5年間

品番	JANコード	標準価格
8929-01	4990097960140	オープン価格

●サイズ…W77×D57mm ●重量…8g ●厚さ…1.8mm
●素材…本体:ポリカーボネート ●発注単位…1箱(40枚入)
●滅菌期限…製造日より5年間

アイカバー ソフト滅菌紐付き

紐も留め具も滅菌済



留め具

2つの要素を組み合わせ

スポンジだからやさしい + 紐付きだから使い易い

病院等での紐の取り付け作業が省けます

- テープで固定する必要がないため、かぶれる心配がありません
- 紐に付いた留め具をずらすことで長さの調節が可能です

30枚入 滅菌期限5年間

品番	JANコード	標準価格
8889-01	4990097064480	オープン価格


●サイズ…W77×D57mm ●重量…10g(紐含む) ●厚さ…1.8mm+スポンジ5mm
●素材…本体:ポリカーボネート、スポンジ:EVA・ポリエステル、紐:コットン(長さ:45cm結んだ状態)、ストッパー:ポリプロピレン
●発注単位…1箱(30枚入) ●滅菌期限…製造日より5年間

お顔にあわせて調整できます。
紐を通す手間が省けます

アイカバー ソフト滅菌

滅菌

周囲にスポンジがついているため
肌へのあたりがやわらかくなります

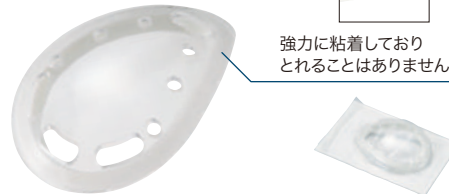

強力に粘着しており
とれることはありません

40枚入

滅菌期限5年間

品番	JANコード	標準価格
8887-01	4990097043225	オープン価格

●サイズ…W77×D57mm ●重量…9g ●厚さ…1.8mm+スポンジ5mm
●素材…本体:ポリカーボネート、スポンジ:EVA・ポリエステル
●発注単位…1箱(40枚入) ●滅菌期限…製造日より5年間

アイカバー 滅菌紐付き 装着方法



付ける向きはどちらでも構わないですが、
細い方を耳側につけるのが一般的です



耳の後ろで留め具をスライドさせて、
長さ調節ができます



アイカバー使用の翌日から保護ガラスを
掛けられることをおすすめします

2021年より順次リニューアル予定



※EOG滅菌、オートクレーブ滅菌(加圧式滅菌)実験済みです。121℃滅菌では変形等は見られませんでした。121℃での複数回の滅菌や121℃以上の温度設定にてオートクレーブを行った場合、劣化や変形の恐れがあるため、1回までの滅菌にてご使用いただくことをおすすめいたします。やむをえず再滅菌を行う場合はEOG滅菌をおすすめします