

ナビス モノポーラ

Electrosurgical pencils

操作性と安全性に優れたモノポーラ（スイッチペン）です



ボタン型



ロッカー型

2種類のスイッチ形状




ホルスターが標準付属

特長

- スイッチはクリック感があり、押していることが分かりやすいです。
- モノポーラを使用しない場合はホルスターに収納することで熱傷等の事故を防止できます。
- PTFEコーティングにより組織の焦げ付きを低減し、かつ絶縁カバーで周辺組織への接触リスクを低減します。
(PTFEコーティングあり/絶縁ありタイプのみ)
- 内部基盤に保護カバーを設けており、液体等の侵入による破損を予防します。

標準仕様メス先端電極

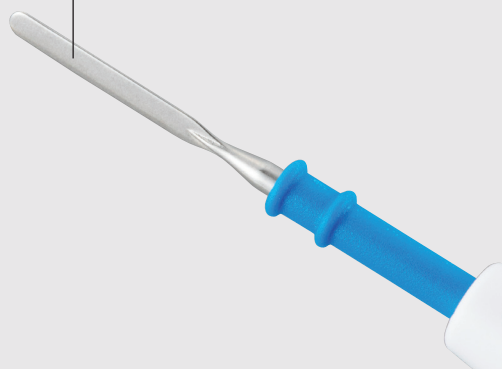

B006・R601

PTFEコーティング

焦げ付きの付着を軽減



絶縁カバー

先端部以外のメス先端電極が
組織に触れることを防ぐ

B006PTFEi・R601PTFEi



ボタン型



ロッカー型

クリック感があるスイッチで
オン・オフが分かりやすい



ホルスターを標準付属し
熱傷事故を防止



3Pプラグコネクタ

品番	型番	スイッチ	仕様	価格(税抜)
8-834-01	B006	ボタン	PTFEコーティングなし/ 絶縁なし	¥20,000
8-834-02	R601	ロッカー		¥20,000
8-834-03	B006PTFEi	ボタン	PTFEコーティングあり/ 絶縁あり	¥30,000
8-834-04	R601PTFEi	ロッカー		¥30,000

仕様

- コード長：約3m
- ホルスター付き
- ラテックスフリー
- EOG滅菌済（個包装）
- 入数：1箱（1本/袋×20袋入）

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875（ユーザー様用）

（午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:30 受付（土・日・祝日及び弊社休業日は除く））

商品の内容に関する
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索



製造販売業者

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

【2506PASPB】