


集まれ!  
アルデヒド・ケトン!

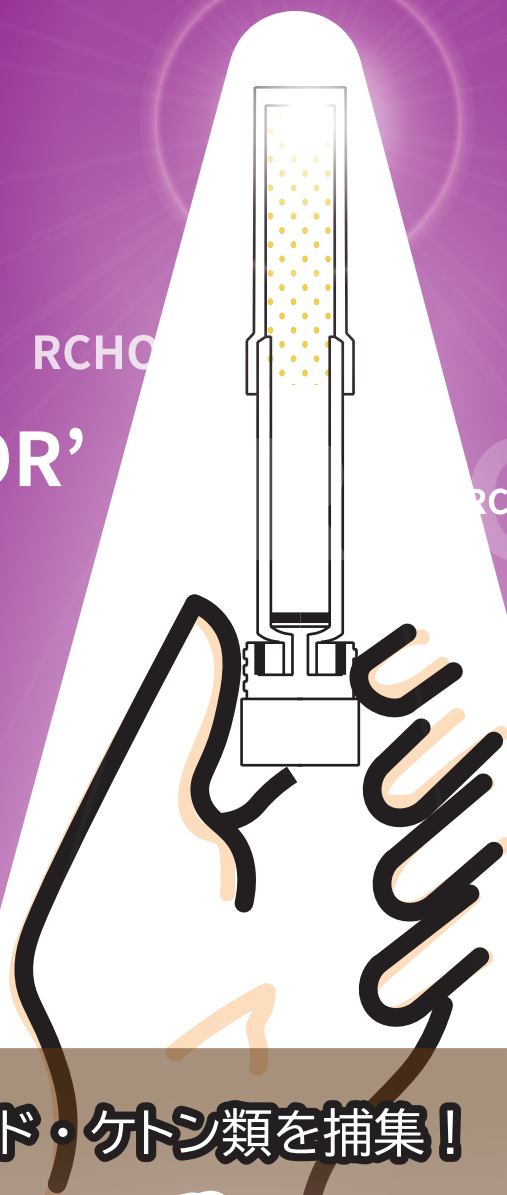

期間：  
2024年  
8月1日～  
10月31日

大気中のアルデヒド・ケトン類を捕集!

パツシブサンプラー  
特別価格キャンペーン

## パッシブサンプリングとは？

パッシブ（拡散）サンプリングは、吸着剤の表面に拡散することで、気体成分（分析対象）をサンプリングします。アクティブ（吸引）サンプリングとは異なり、パッシブサンプラーは可動部品が使用されておらず、電力不要で、簡単に使用できます（ポンプ操作やキャリブレーションが不要）。

サンプリング後、吸着された分析対象は溶媒または加熱脱離により吸着剤から脱離されます

## パッシブサンプラー DSD-DNPH の特長

- ポンプが不要、操作が簡単
- サンプリング費用の削減
- アクティブ法との高い相関性
- 長期サンプリングが容易
- 高い繰り返し再現性
- 高いサンプリングレート

※ホルムアルデヒドは、捕集速度 71.9mL/min に相当



## パッシブサンプラー製品情報

アズワン品番	商品名	キャンペーン価格
89-0782-13-30	パッシブサンプラー-DSD-DNPH 28221-U	21,000

※価格は税抜です。

販売店

代理店

営業企画部 試薬グループ

E-mail : Reagents@so.as-1.co.jp

TEL : 06-6447-8641 FAX : 06-6447-8642

総合検索サイト : **AXEL** <https://axel.as-1.co.jp/>

※本紙掲載の全製品は研究用です。